




Caixa Organizadora



**Inovação
para uma
vida plena**

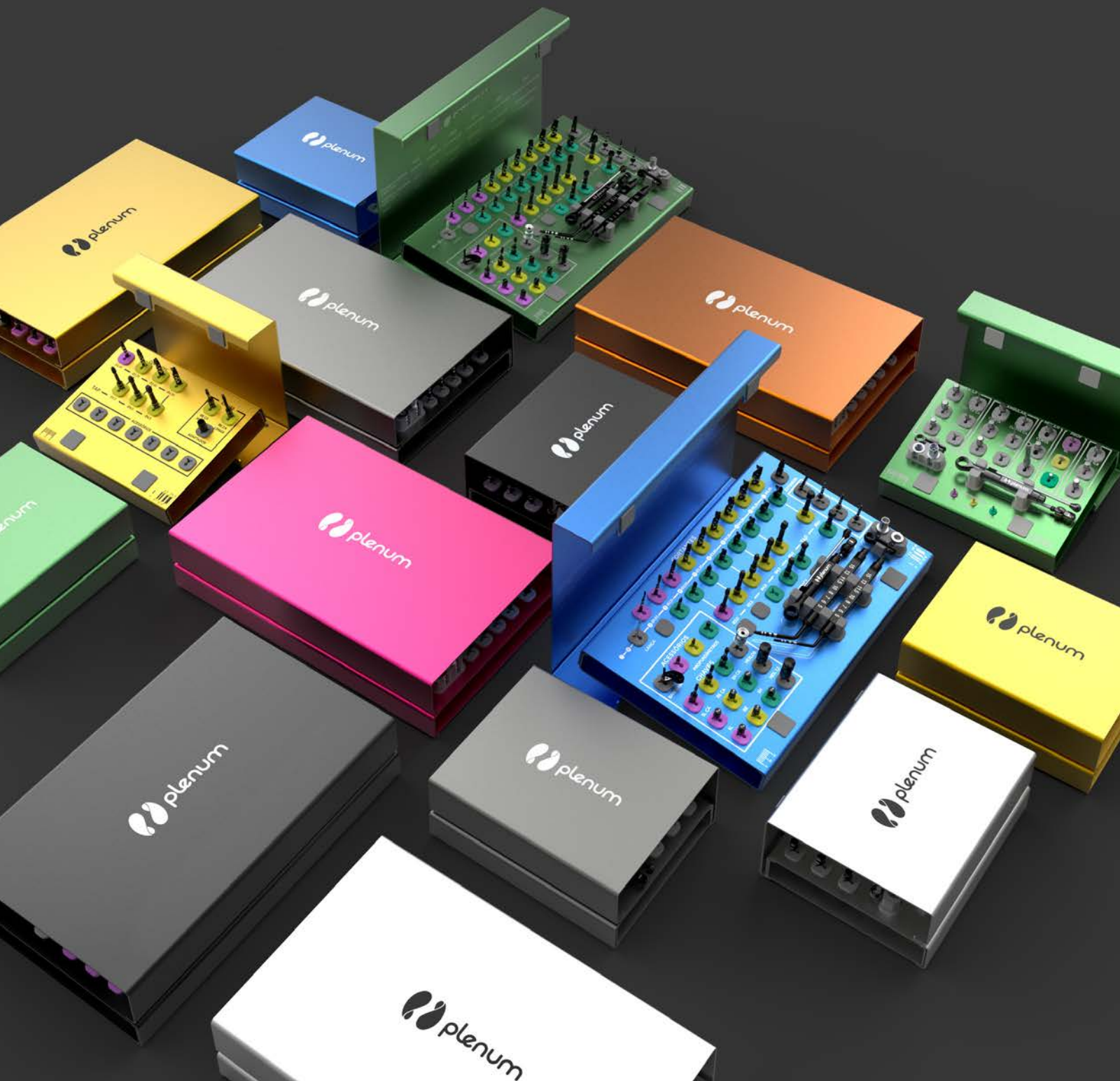



CONECTAR DOIS MUNDOS APARENTEMENTE DISTANTES E PERMITIR QUE A TECNOLOGIA DEVOLVA A ESPONTANEIDADE DA VIDA.

Com esse propósito, nasceu a Plenum®. E com ela, a implantação ganha uma nova dimensão. Por trás de cada inovação, profissionais com uma absoluta paixão pelo conhecimento e um profundo encantamento pelo potencial humano. Uma mistura motivadora de gente que está revolucionando processos, produtos e serviços por meio da cocriação.

Inovando em implantes e biomateriais, a Plenum® busca a expressão do corpo em sua totalidade, da regeneração física ao bem-estar mental e social. Ao trazer soluções de excelência e torná-las acessíveis e sustentáveis, a Plenum® revoluciona o mercado e constrói vínculos fortes, inspirando a comunidade científica e tantas vidas que estão sendo renovadas.

De um leve sorriso ao riso solto, largo. Dos movimentos mais sutis aos mais surpreendentes.

Reabilitar é tornar a vida ainda maior e melhor.

PLENUM®


INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA.

A verdadeira inovação deve estar sempre a serviço de uma vida plena



Com o desenvolvimento de soluções inovadoras e de alta qualidade, a Plenum® chega para protagonizar o novo momento da implantodontia e da bioengenharia. Motivada pela ciência da vida, a instituição busca revolucionar processos, produtos, serviços e comportamentos, oferecendo soluções acessíveis com elevado grau de ciência e tecnologia.

Incorporar a cultura de inovação no DNA da Plenum® só foi possível com investimentos em pesquisas científicas, testes de eficácia da tecnologia e criação de novos modelos de atuação para atender ao mercado. Atré-ladas a isso, pessoas engajadas e capacitadas cuidam de cada detalhe do projeto e levam a busca do conhecimento sólido como guia para uma vida plena.

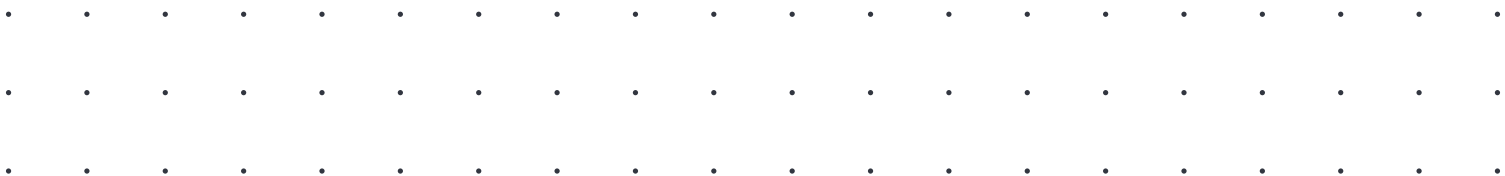

Um propósito, muitas entregas

**SOLUÇÕES COMPLETAS E CUSTOMIZÁVEIS
PARA IMPLANTODONTIA;**

**SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CUSTOMIZADAS
PARA AUXÍLIO NAS CIRURGIAS;**

PESQUISAS, CURSOS E PALESTRAS.

Caixa Organizadora

A Caixa Organizadora dispõe de estrutura que garante resistência ao desgaste e durabilidade no processo de reutilização e esterilização. Isso se dá ao fato de sua superfície total ser protegida por uma camada de anodização. Com a finalidade de promover longevidade e auxílio no momento de identificação, todas as marcações são gravadas a laser.

NOTA: Instrumentais, Chaves e Acessórios Cirúrgicos vendidos separadamente.

REGISTRO ANVISA Não passível de regularização

ESTRUTURA
em alumínio.



SUPORTE
para fixação dos instrumentais
em silicone atóxico e com identificação por cores conforme adaptações do implante.

TAMPA
removível e
serve como apoio
inclinável para
plataforma.

MODELOS	CIRÚRGICA	CIRÚRGICA SMART	PROTÉTICA
DIMENSÕES	225 x 141 x 55mm	178 x 113 x 55mm	178 x 113 x 55mm

CORES	CÓDIGOS		
-------	---------	--	--

FUMÊ		018-15-F00-00-03	018-15-F00-00-08	018-15-F00-00-04
PRETA		018-15-F00-00-33	018-15-F00-00-35	018-15-F00-00-34
BRANCA		018-15-F00-00-27	018-15-F00-00-29	018-15-F00-00-28
LARANJA		018-15-F00-00-12	018-15-F00-00-14	018-15-F00-00-13
DOURADA		018-15-F00-00-15	018-15-F00-00-17	018-15-F00-00-16
AZUL		018-15-F00-00-21	018-15-F00-00-23	018-15-F00-00-22
VERDE		018-15-F00-00-24	018-15-F00-00-26	018-15-F00-00-25
ROSA		018-15-F00-00-30	018-15-F00-00-32	018-15-F00-00-31

Montagem das Caixas Organizadoras



CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA

- MONTAGEM
- COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART

- MONTAGEM
- COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA

- MONTAGEM
- COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS

TAMBOR QUAD CATRACA CURTO



CHAVE INSERÇÃO SL MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO RE MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO SH CURTA



CHAVE HEX DIGITAL 1,2mm MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO SL LONGA



CHAVE INSERÇÃO RE LONGA



CHAVE INSERÇÃO SH MÉDIA



CHAVE HEX DIGITAL LONGA 1,2mm



BANDEIRA



PROFUNDÍMETRO SL



PROFUNDÍMETRO RE



PROFUNDÍMETRO SH



CHAVE INSERÇÃO SL CA MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO RE CA MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO SH CA MÉDIA



CHAVE HEXALOBULAR LONGA 1,2mm



MACHO DE ROSCA Ø3,0 MÉDIA



MACHO DE ROSCA Ø3,5 MÉDIA



MACHO DE ROSCA Ø4,0 MÉDIA



MACHO DE ROSCA Ø4,5 MÉDIA



MACHO DE ROSCA Ø5,0 MÉDIA



MACHO DE ROSCA Ø6,0 MÉDIA



MACHO DE ROSCA SH Ø4,5



MACHO DE ROSCA SH Ø5,0



MACHO DE ROSCA SH Ø6,0



PINO DE PARALELISMO 25°



PINO DE PARALELISMO



TAMBOR HEX CATRACA LONGO



TAMBOR HEX CATRACA CURTO




SONDA DE MEDIÇÃO Ø2,8



SONDA DE MEDIÇÃO Ø1,6



CATRACA CIRÚRGICA REF TORQUE 0-60

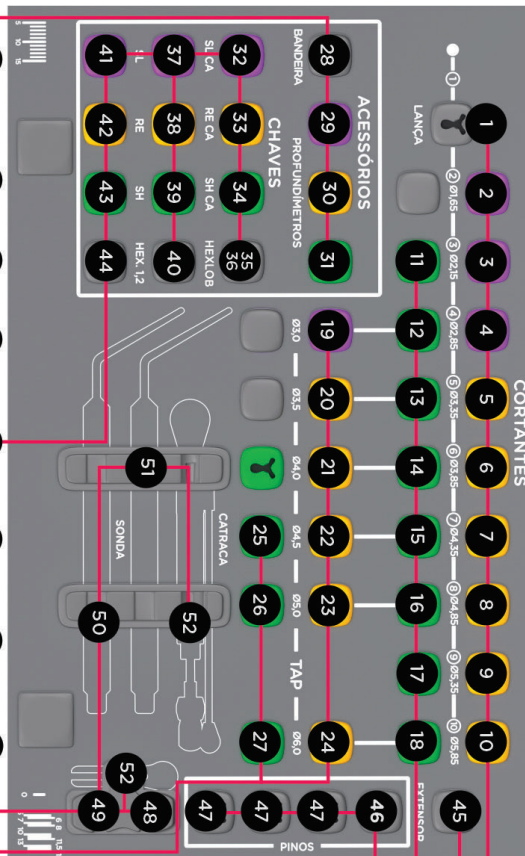


FRESA SH Ø2,15



FRESA SH Ø2,85



FRESA SH Ø3,35

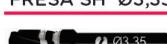

FRESA SH Ø3,85



FRESA SH Ø4,35



FRESA SH Ø4,85



FRESA SH Ø5,35



FRESA SH Ø5,85



FRESA SH Ø6,35



FRESA SH Ø7,35



FRESA SH Ø8,35



FRESA SH Ø9,35



FRESA SH Ø10,35



FRESA LANÇA MÉDIA



FRESA Ø1,65 MÉDIA



FRESA Ø2,15 MÉDIA



FRESA Ø2,85 MÉDIA



FRESA Ø3,35 MÉDIA



FRESA Ø3,85 MÉDIA



FRESA Ø4,35 MÉDIA



FRESA Ø4,85 MÉDIA



FRESA Ø5,35 MÉDIA



FRESA Ø5,85 MÉDIA



FRESA Ø6,35 MÉDIA



FRESA Ø7,35 MÉDIA



FRESA Ø8,35 MÉDIA



EXTENSOR DE FRESA



CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA

FRESA

- 1 FRESA LANÇA MÉDIA
018-15-F10-00-25
- 2 FRESA Ø1,65 MÉDIA
018-15-F10-00-34
- 3 FRESA Ø2,15 MÉDIA
018-15-F10-00-31
- 4 FRESA Ø2,85 MÉDIA
018-15-F10-00-04
- 5 FRESA Ø3,35 MÉDIA
018-15-F10-00-05
- 6 FRESA Ø3,85 MÉDIA
018-15-F10-00-06
- 7 FRESA Ø4,35 MÉDIA
018-15-F10-00-07
- 8 FRESA Ø4,85 MÉDIA
018-15-F10-00-08
- 9 FRESA Ø5,35 MÉDIA
018-15-F10-00-09
- 10 FRESA D5,85 MÉDIA
018-15-F10-00-10

- 11 FRESA Ø2,15 SHORT
018-15-F10-00-33
- 12 FRESA Ø2,85 SHORT
018-15-F10-00-11
- 13 FRESA Ø3,35 SHORT
018-15-F10-00-12
- 14 FRESA Ø3,85 SHORT
018-15-F10-00-13
- 15 FRESA Ø4,35 SHORT
018-15-F10-00-14
- 16 FRESA Ø4,85 SHORT
018-15-F10-00-15
- 17 FRESA Ø5,35 SHORT
018-15-F10-00-16
- 18 FRESA Ø5,85 SHORT
018-15-F10-00-17

MACHO DE ROSCA

- 19 MACHO DE ROSCA Ø3,0 MÉDIA
018-15-F10-00-54
- 20 MACHO DE ROSCA Ø3,5 MÉDIA
018-15-F10-00-55
- 21 MACHO DE ROSCA Ø4,0 MÉDIA
018-15-F10-00-56
- 22 MACHO DE ROSCA Ø4,5 MÉDIA
018-15-F10-00-57
- 23 MACHO DE ROSCA Ø5,0 MÉDIA
018-15-F10-00-58
- 24 MACHO DE ROSCA Ø6,0 MÉDIA
018-15-F10-00-59
- 25 MACHO DE ROSCA Ø4,5 SHORT
018-15-F10-00-38
- 26 MACHO DE ROSCA Ø5,0 SHORT
018-15-F10-00-39
- 27 MACHO DE ROSCA Ø6,0 SHORT
018-15-F10-00-40

- 28 BANDEIRA
018-15-F10-00-95
- 29 PROFUNDÍMETRO SL
018-15-F10-00-94
- 30 PROFUNDÍMETRO RE
018-15-F10-00-99
- 31 PROFUNDÍMETRO SH
018-15-F10-01-00


CHAVE

- 32 CHAVE INSERÇÃO SL CA MÉDIA
018-15-F10-00-65
- 33 CHAVE INSERÇÃO RE CA MÉDIA
018-15-F10-00-68
- 34 CHAVE INSERÇÃO SH CA MÉDIA
018-15-F10-00-71
- 35 CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm LONGA
018-15-F10-00-14
- 36 TAMBOR QUADRADO CATRACA CURTO
018-15-F20-00-26
- 37 CHAVE INSERÇÃO SL MÉDIA
018-15-F10-00-78
- 38 CHAVE INSERÇÃO RE MÉDIA
018-15-F10-00-81
- 39 CHAVE INSERÇÃO SH CURTA
018-15-F10-00-86
- 40 CHAVE DIGITAL HEX 1,2mm MÉDIA
018-15-F10-00-87
- 41 CHAVE INSERÇÃO SL LONGA
018-15-F10-00-79
- 42 CHAVE INSERÇÃO RE LONGA
018-15-F10-00-82
- 43 CHAVE INSERÇÃO SH MÉDIA
018-15-F10-00-84
- 44 CHAVE HEX DIG D1,2mm LONGA
018-15-F10-00-89
- 45 EXTENSOR DE FRESA
018-15-F10-00-74

- 46 PINO DE PARALELISMO 25°
018-15-F10-00-93
- 47 PINO DE PARALELISMO
018-15-F10-00-92

- 48 TAMBOR HEX CATRACA LONGO
018-15-F10-00-97
- 49 TAMBOR HEX CATRACA CURTO
018-15-F10-00-96

- 50 SONDA DE MEDIÇÃO Ø2,8
018-15-F10-00-90
- 51 SONDA DE MEDIÇÃO Ø1,6
018-15-F10-00-91
- 52 CATRACA CIRÚRGICA REF TORQUE 0-60
018-15-F10-01-02

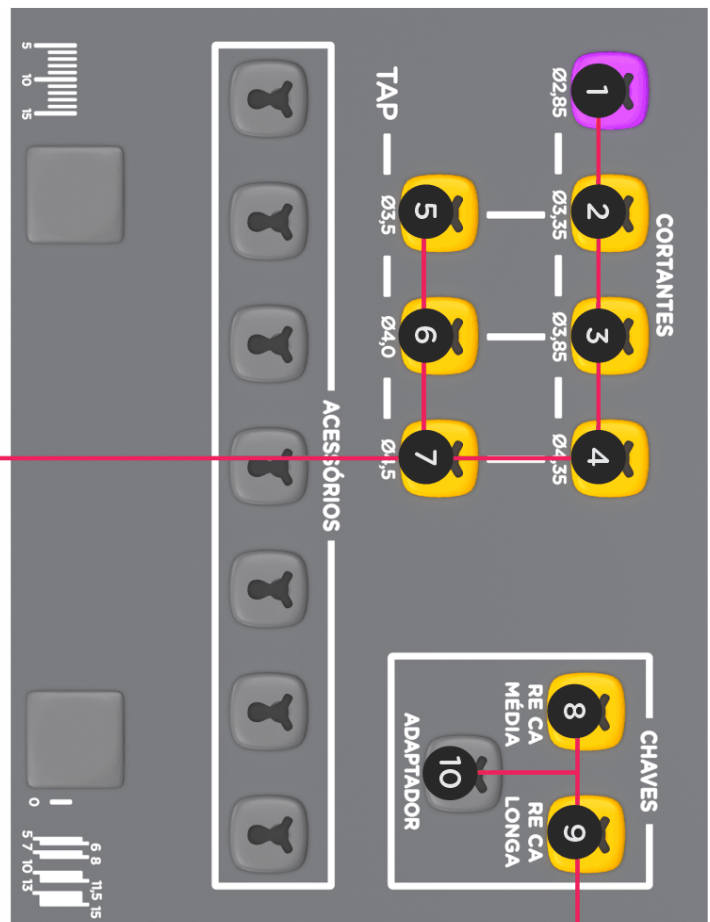

FRESA Ø2,85 MÉDIA



FRESA Ø3,35 MÉDIA



FRESA Ø3,85 MÉDIA



FRESA Ø4,35 MÉDIA



MACHO DE ROSCA
Ø3,5 MÉDIA



MACHO DE ROSCA
Ø4,0 MÉDIA



MACHO DE ROSCA
Ø4,5 MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO
RE CA MÉDIA



CHAVE INSERÇÃO
RE CA LONGA



ADAPTADOR QUADRADO



CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART

FRESA


- 1 FRESA Ø2,85 MÉDIA
018-15-F10-00-04
- 2 FRESA Ø3,35 MÉDIA
018-15-F10-00-05
- 3 FRESA Ø3,85 MÉDIA
018-15-F10-00-06
- 4 FRESA Ø4,35 MÉDIA
018-15-F10-00-07

MACHO DE ROSCA

- 5 MACHO DE ROSCA Ø3,5 MÉDIA
018-15-F10-00-55
- 6 MACHO DE ROSCA Ø4,0 MÉDIA
018-15-F10-00-56
- 7 MACHO DE ROSCA Ø4,5 MÉDIA
018-15-F10-00-57

CHAVE

- 8 CHAVE INSERÇÃO RE CA MÉDIA
018-15-F10-00-68
- 9 CHAVE INSERÇÃO RE CA LONGA
018-15-F10-00-69
- 10 ADAPTADOR QUADRADO
018-15-F10-01-24

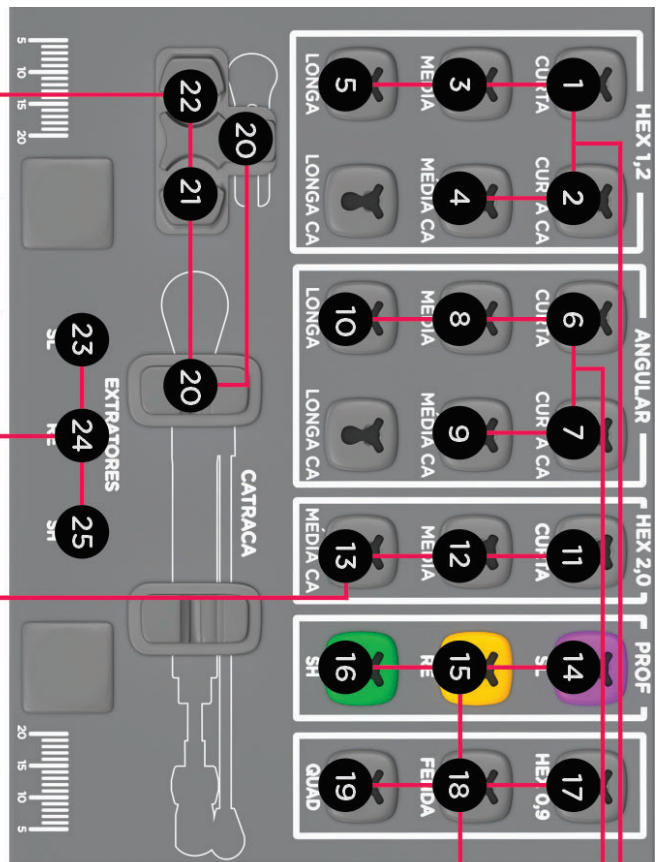

EXTRATOR DE COMPONENTES SL



EXTRATOR DE COMPONENTES RE



EXTRATOR DE COMPONENTES SH



CHAVE HEXAGONAL 2,0mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL 2,0mm MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL 2,0 CA MÉDIA



20 CATRACA CIRURGICA REF TORQUE 0-60



TAMBOR QUAD CATRACA LONGO



TAMBOR QUAD CATRACA CURTO



CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm CURTA



CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA CURTA



CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm MÉDIA



CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA MÉDIA



CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm LONGA



CHAVE HEXAGONAL 1,2mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA CURTA



CHAVE HEXAGONAL 1,2mm MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL 1,2mm LONGA



PROFUNDÍMETRO SL



PROFUNDÍMETRO RE



PROFUNDÍMETRO SH



CHAVE HEXAGONAL 0,9mm MÉDIA



CHAVE FENDA MÉDIA




CHAVE QUADRADA MÉDIA



CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA

- 1 **CHAVE HEXAGONAL 1,2mm CURTA**
018-15-F20-00-10
- 2 **CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA CURTA**
018-15-F20-00-03
- 3 **CHAVE HEXAGONAL 1,2mm MEDIA**
018-15-F20-00-09
- 4 **CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA MEDIA**
018-15-F10-00-76
- 5 **CHAVE HEXAGONAL 1,2mm LONGA**
018-15-F20-00-11
- 11 **CHAVE HEXAGONAL 2,0mm CURTA**
018-15-F20-00-24
- 12 **CHAVE HEXAGONAL 2,0mm MEDIA**
018-15-F20-00-23
- 13 **CHAVE HEXAGONAL 2,0 CA MEDIA**
018-15-F10-00-77
- 14 **PROFUNDÍMETRO SL**
018-15-F10-00-94
- 15 **PROFUNDÍMETRO RE**
018-15-F10-00-99
- 16 **PROFUNDÍMETRO SH**
018-15-F10-01-00
- 20 **CATRACA CIRURGICA REF TORQUE 0-60**
018-15-F10-01-02
- 21 **TAMBOR QUADRADO CATRACA LONGO**
018-15-F20-00-27
- 22 **TAMBOR QUADRADO CATRACA CURTO**
018-15-F20-00-26
- 6 **CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm CURTA**
018-15-F20-00-13
- 7 **CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA CURTA**
018-15-F20-00-01
- 8 **CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm MEDIA**
018-15-F20-00-12
- 9 **CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA MEDIA**
018-15-F10-00-75
- 10 **CHAVE HEXALOBULAR 1,2mm LONGA**
018-15-F20-00-14
- 17 **CHAVE HEXAGONAL 0,9 MEDIA**
018-15-F20-00-07
- 18 **CHAVE FENDA MEDIA**
018-15-F20-00-20
- 19 **CHAVE QUADRADA MEDIA**
018-15-F20-00-17
- 23 **EXTRATOR DE COMPONENTES SL**
018-15-F60-00-12
- 24 **EXTRATOR DE COMPONENTES RE**
018-15-F60-00-13
- 25 **EXTRATOR DE COMPONENTES SH**
018-15-F60-00-11

Instrumentos de Uso Odontológico

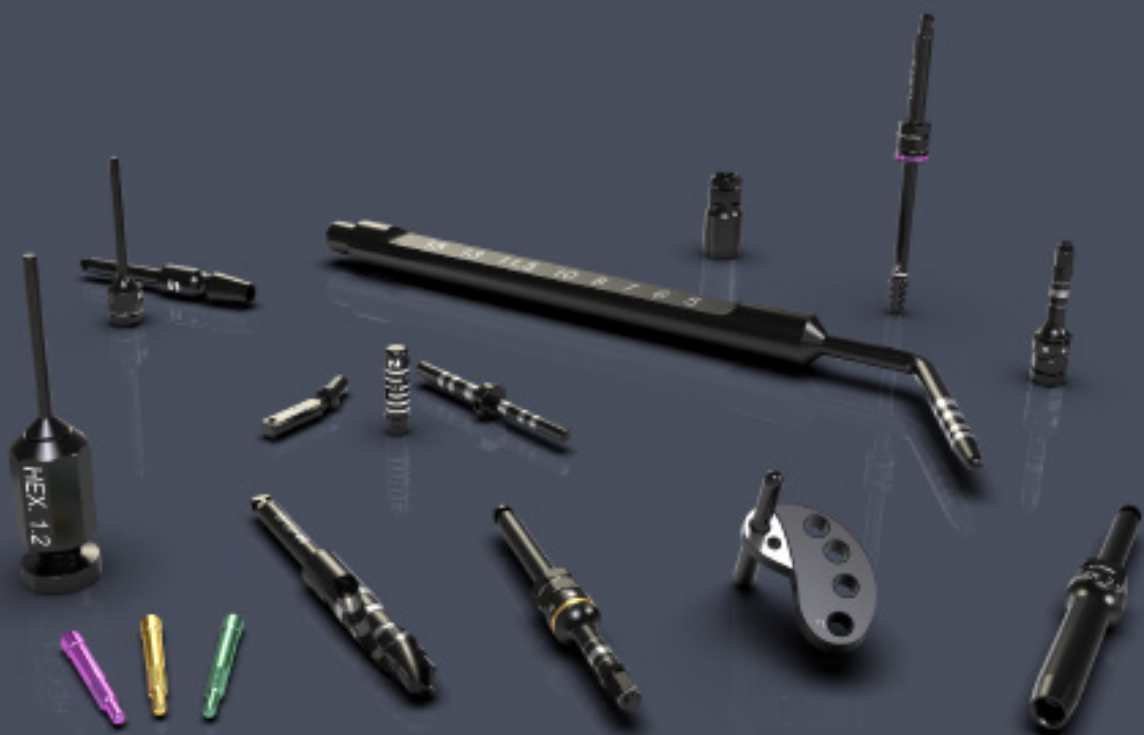

INSTRUMENTOS de uso odontológico

Os instrumentos de uso odontológico são fabricados com as melhores práticas e materiais que agregam maior durabilidade de corte, alta resistência ao desgaste e à oxidação.

Os itens que compõem a caixa organizadora da Plenum, com exceção dos tambores e da fresa lança, são revestidos por deposição de filme de DLC (Diamond-like Carbon). O DLC é um filme fino de carbono com características físico-químicas próximas a do diamante. As características inerentes ao DLC são:

- ▶ Alta dureza;
- ▶ Baixo coeficiente de atrito;
- ▶ Menor desgaste adesivo associado;
- ▶ Redução da fadiga de superfície;
- ▶ Resistência à oxidação;
- ▶ Biocompatibilidade;
- ▶ Atividade bactericida;

INSTRUMENTAL



EXTENSOR
DE FRESA



FRESA LANÇA



FRESA SH



FRESA MÉDIA



FRESA LONGA



MACHO DE ROSCA
LONGO



MACHO DE ROSCA
MÉDIO



MACHO DE ROSCA
SH



TAMBOR HEXAGONAL
CATRACA CURTO



TAMBOR HEXAGONAL
CATRACA LONGO



TAMBOR QUADRADO
CATRACA CURTO



TAMBOR QUADRADO
CATRACA LONGO



ADAPTADOR
QUADRADO

FRESA LANÇA

A Fresa Lança tem como matéria prima aço inox cirúrgico com alta resistência mecânica e precisão, marcação de altura a laser para limite de profundidade.

DURABILIDADE

pois o item passa pelo processo de tratamento térmico.

DIMENSÕES CÓDIGOS

MÉDIA	018-15-F10-00-25
LONGA	018-15-F10-00-26



3 FACES

com alto poder de corte.

EXTENSOR DE FRESA

O Extensor tem como finalidade prolongar o comprimento total da fresa, facilitando a perfuração conforme o posicionamento dos dentes.

CÓDIGO

018-15-F10-00-74



REVESTIMENTO

em DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

CORPO ERGONÔMICO

para desencaixe da broca.

ENCAIXE

rápido e preciso.

FRESA

A Fresa apresenta desenho cilíndrico escalonado* que oferece maior precisão no guia da broca e alta exatidão no encaixe e perfuração. A ponta cônica ativa e flancos helicoidais proporcionam alto poder de corte.

***NOTA:** Com exceção da Ø1,65 e Ø2,15.



DIMENSÕES CÓDIGOS



MÉDIA

Ø1,65	018-15-F10-00-34
Ø2,15	018-15-F10-00-31
Ø2,85	018-15-F10-00-04
Ø3,35	018-15-F10-00-05
Ø3,85	018-15-F10-00-06
Ø4,35	018-15-F10-00-07
Ø4,85	018-15-F10-00-08
Ø5,35	018-15-F10-00-09
Ø5,85	018-15-F10-00-10



LONGA

Ø1,65	018-15-F10-00-35
Ø2,15	018-15-F10-00-32
Ø2,85	018-15-F10-00-18
Ø3,35	018-15-F10-00-19
Ø3,85	018-15-F10-00-20
Ø4,35	018-15-F10-00-21
Ø4,85	018-15-F10-00-22
Ø5,35	018-15-F10-00-23
Ø5,85	018-15-F10-00-24



SH

Ø2,15	018-15-F10-00-33
Ø2,85	018-15-F10-00-11
Ø3,35	018-15-F10-00-12
Ø3,85	018-15-F10-00-13
Ø4,35	018-15-F10-00-14
Ø4,85	018-15-F10-00-15
Ø5,35	018-15-F10-00-16
Ø5,85	018-15-F10-00-17

IMPLANTE SH - USO EXCLUSIVO DA FRESA SH.

IMPLANTE SL E RE - INDICADO AS FRESAS MÉDIA E LONGA.

MACHO DE ROSCA

O Macho de Rosca é fabricado em aço inox com alta resistência mecânica e precisão na formação das roscas. Identificado por faixa color code e dispõe de retenção por anel metálico.



DIMENSÕES CÓDIGOS



MÉDIA

Ø3,0mm	018-15-F10-00-54
Ø3,5mm	018-15-F10-00-55
Ø4,0mm	018-15-F10-00-56
Ø4,5mm	018-15-F10-00-57
Ø5,0mm	018-15-F10-00-58
Ø6,0mm	018-15-F10-00-59



LONGA

Ø3,0mm	018-15-F10-00-44
Ø3,5mm	018-15-F10-00-45
Ø4,0mm	018-15-F10-00-46
Ø4,5mm	018-15-F10-00-47
Ø5,0mm	018-15-F10-00-48
Ø6,0mm	018-15-F10-00-49



SH

Ø4,5mm	018-15-F10-00-38
Ø5,0mm	018-15-F10-00-39
Ø6,0mm	018-15-F10-00-40


IMPLANTE SH - USO EXCLUSIVO DO MACHO DE ROSCA SH

IMPLANTE SL - INDICADO MACHO DE ROSCA MÉDIO E LONGO Ø3,0mm.

IMPLANTE RE - INDICADO MACHO DE ROSCA MÉDIO E LONGO, A PARTIR DO Ø3,5mm.

TAMBOR

O Tambor apresenta dupla função, sendo possível ser manipulado como adaptador digital para chaves ou a Catraca da Plenum®.

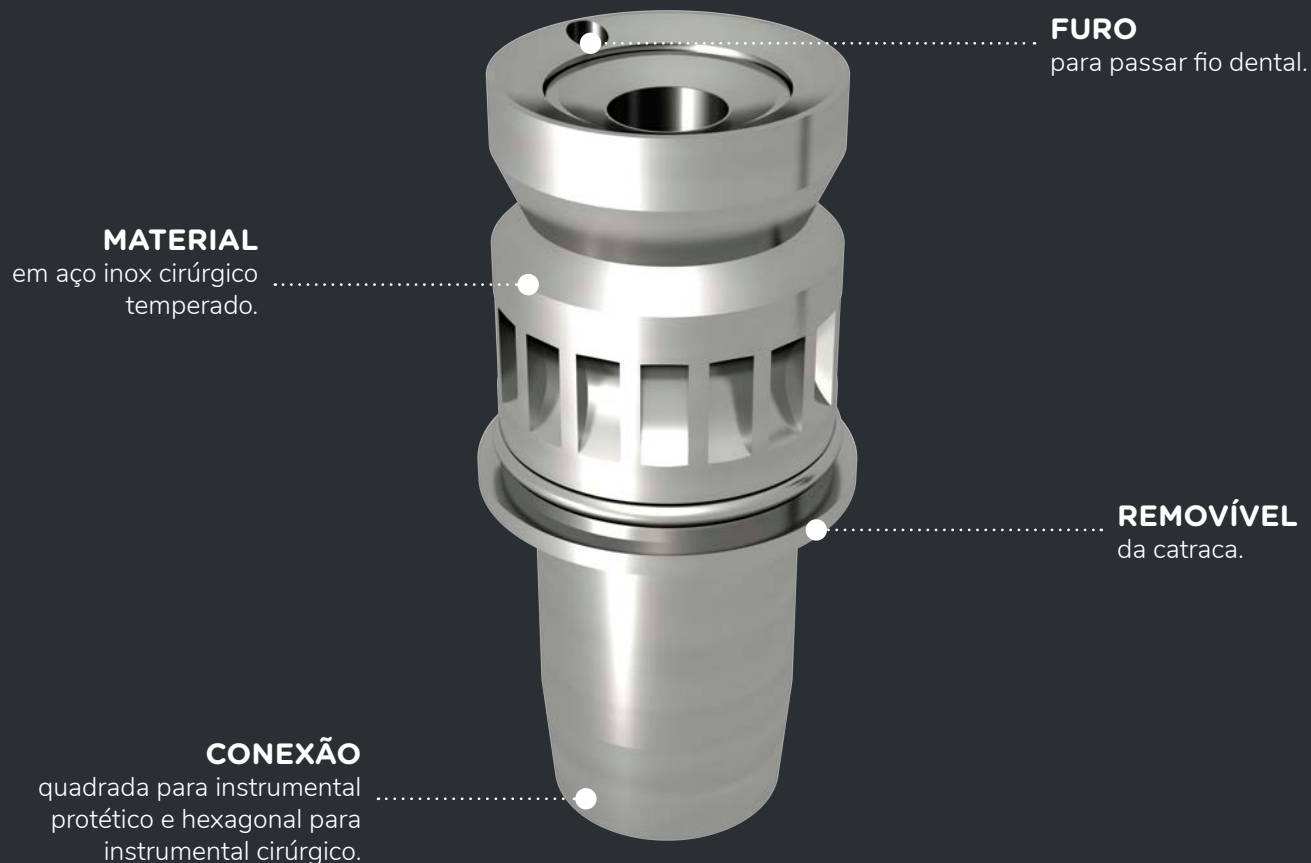


DIMENSÕES CÓDIGOS



CURTO

HEXAGONAL CATRACA 018-15-F10-00-96

QUADRADO CATRACA 018-15-F10-00-26

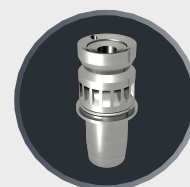

LONGO

HEXAGONAL CATRACA 018-15-F10-00-97


QUADRADO CATRACA 018-15-F10-00-27

ADAPTADOR QUADRADO

O Adaptador quadrado é utilizado para transformar o encaixe hexagonal para adaptação quadrada e assim ser utilizada com Catraca (de adaptação quadrada) da Plenum.

NOTA: Para a Catraca Hexagonal da Plenum, este item é dispensável.

CONEXÃO
quadrada.

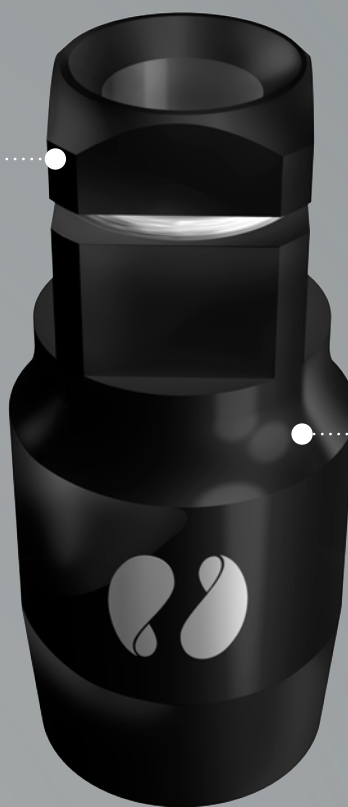

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste
e oxidação.

DIMENSÃO CÓDIGO

□ 4,0mm

018-15-F10-01-24

CHAVES



CHAVE HEXAGONAL
1,2mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL
1,2mm MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL
1,2mm LONGA



CHAVE HEXAGONAL
CA 1,2mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL
CA 1,2mm MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL
CA 1,2mm LONGA



CHAVE HEXAGONAL
2,0mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL
2,0mm MÉDIA



CHAVE HEXAGONAL
CA 2,0mm CURTA



CHAVE HEXAGONAL
CA 2,0mm MÉDIA



CHAVE DIGITAL
HEX 1,2mm CURTA



CHAVE DIGITAL
HEX 1,2mm MÉDIA



CHAVE DIGITAL
HEX 1,2mm LONGA



CHAVE HEXAGONAL
0,9mm

CHAVES



CHAVE
HEXALOBULAR CURTA



CHAVE
HEXALOBULAR MÉDIA



CHAVE
HEXALOBULAR LONGA



CHAVE
HEXALOBULAR CA CURTA



CHAVE
HEXALOBULAR CA MÉDIA



CHAVE
HEXALOBULAR CA LONGA



CHAVE INSERÇÃO
SL



CHAVE INSERÇÃO
SL CA



CHAVE INSERÇÃO
RE



CHAVE INSERÇÃO
RE CA




CHAVE INSERÇÃO
SH



CHAVE INSERÇÃO
SH CA



CHAVE
QUADRADA

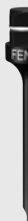

CHAVE
FENDA

CHAVE

HEXAGONAL 1,2mm

A Chave Hexagonal 1,2mm possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência mecânica.

NOTA: Utilizada para fixação do Cicatrizador, Tapa Implante, Mini Pilar 17°, Ti-Base e Pilar Equator da Plenum®.



MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-10



MÉDIA

018-15-F20-00-09



LONGA

018-15-F20-00-11

CHAVE

HEXAGONAL 1,2mm CA

A Chave Hexagonal 1,2mm CA fabricada em aço inox com alta resistência mecânica.

NOTA: Utilizada para fixação do Cicatrizador, Tapa Implante, Mini Pilar 17°, Ti-Base e Pilar Equator da Plenum®.



MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-03



MÉDIA

018-15-F10-00-76



LONGA

018-15-F20-00-04

CHAVE

HEXAGONAL 2,0mm

A Chave Hexagonal 2,0mm possui retenção por anel metálico. Fabricada em aço inox com alta resistência.

NOTA: Utilizada para fixação do Mini Pilar e Pilar Plenum®.

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste e
oxidação.



PARAFUSO

de fixação e transporte do
componente.

MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-24



MÉDIA

018-15-F20-00-23

CHAVE

HEXAGONAL 2,0mm CA

A Chave Hexagonal 2,0mm CA pode ser utilizada tanto com torquímetro como com contra ângulo. Possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência

NOTA: Utilizada para fixação do Mini Pilar e Pilar Plenum®.

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste e
oxidação.



GRAVAÇÃO
a laser.

MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-05




MÉDIA

018-15-F10-00-77

CHAVE

DIGITAL HEX 1,2mm

A Chave Digital HEX 1,2mm possui geometria octogonal no corpo com o intuito de facilitar a limpeza e aderência no momento do torque.

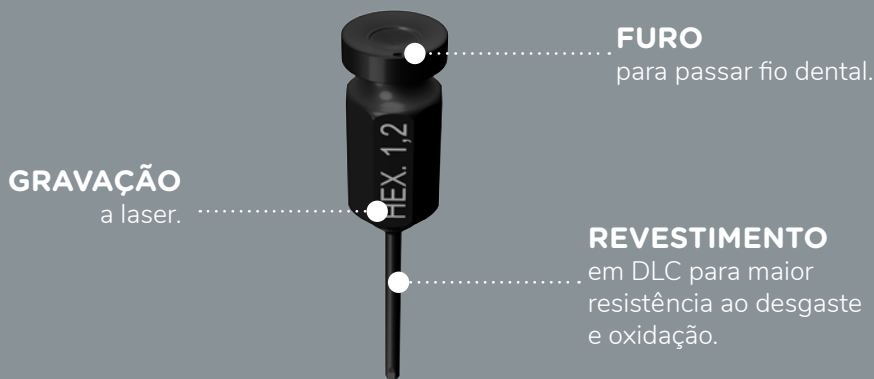

MODELOS CÓDIGOS

CURTA	018-15-F10-00-88
MÉDIA	018-15-F10-00-87
LONGA	018-15-F10-00-89

CHAVE

HEXAGONAL 0,9mm

A Chave Hexagonal 0,9mm possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência.



DIMENSÃO CÓDIGO

MÉDIA	018-15-F20-00-07
-------	------------------

CHAVE

HEXALOBULAR

A Chave Hexalobular possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência mecânica.

NOTA: Utilizada para fixação de componentes da linha Smart Plenum®.



MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-13



MÉDIA

018-15-F20-00-12



LONGA

018-15-F20-00-14

CHAVE

HEXALOBULAR CA

A Chave Hexalobular CA fabricada em aço inox com alta resistência mecânica.

NOTA: Utilizada para fixação de componentes da linha Smart Plenum®.

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao
desgaste e oxidação.



MODELOS CÓDIGOS



CURTA

018-15-F20-00-01



MÉDIA

018-15-F10-00-75



LONGA

018-15-F20-00-02

CHAVE INSERÇÃO

A Chave Inserção possui design com faixa color code de acordo com a plataforma do implante e retenção por anel metálico. Fabricada em aço inox com alta resistência mecânica, possui marcações a laser para referência da posição do hexágono.

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste e
oxidação.



GRAVAÇÕES
a laser para referência de
profundidade.

PLATAFORMAS CÓDIGOS



SL

CURTA 018-15-F10-00-80
MÉDIA 018-15-F10-00-78
LONGA 018-15-F10-00-79



RE

CURTA 018-15-F10-00-83
MÉDIA 018-15-F10-00-81
LONGA 018-15-F10-00-82



SH

CURTA 018-15-F10-00-86
MÉDIA 018-15-F10-00-84

CHAVE

INSERÇÃO CA

A Chave Inserção CA possui design com faixa color code de acordo com a plataforma do implante e retenção por anel metálico. Pode ser usada tanto com torquímetro como com contra ângulo. Fabricada em aço inox com alta resistência mecânica, possui marcações a laser para referência da posição do hexágono.

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste e
oxidação.



POSSIBILIDADE
de uso com a catraca.

GRAVAÇÕES
a laser para referência de
profundidade.

PLATAFORMAS CÓDIGOS



SL

CURTA 018-15-F10-00-67
MÉDIA 018-15-F10-00-65
LONGA 018-15-F10-00-66



RE

CURTA 018-15-F10-00-70
MÉDIA 018-15-F10-00-68
LONGA 018-15-F10-00-69



SH


CURTA 018-15-F10-00-73
MÉDIA 018-15-F10-00-71

CHAVE

QUADRADA

A Chave Quadrada possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência.

GRAVAÇÃO
a laser.

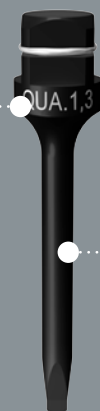

REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste
e oxidação.

DIMENSÃO CÓDIGO

□ 1,3mm MÉDIA 018-15-F20-00-17

CHAVE

FENDA

A Chave Fenda possui retenção por anel metálico, fabricada em aço inox com alta resistência.

GRAVAÇÃO
a laser.



REVESTIMENTO
em DLC para maior
resistência ao desgaste
e oxidação.

DIMENSÃO CÓDIGO

MÉDIA 018-15-F20-00-20

ACESSÓRIO CIRÚRGICO



PROFUNDÍMETRO SL



PROFUNDÍMETRO RE



PROFUNDÍMETRO SH



EXTRATOR DE COMPONENTES SL



EXTRATOR DE COMPONENTES RE



EXTRATOR DE COMPONENTES SH



BANDEIRA



PINO DE PARALELISMO



PINO DE PARALELISMO 25°



SONDA DE MEDIÇÃO Ø1,65mm



SONDA DE MEDIÇÃO Ø2,85mm



CATRACA

PROFUNDÍMETRO

O Profundímetro auxilia na escolha de altura de transmucoso (cinta) do componente protético. Possui marcações a laser com alturas de 1 a 6mm.



PLATAFORMAS CÓDIGOS



SL

018-15-F10-00-94



RE

018-15-F10-00-99




SH

018-15-F10-01-00

EXTRATOR DE COMPONENTES

O Extrator apresenta adaptação hexagonal 1,2mm em uma das extremidades e rosca na outra. Indicado para a remoção de componentes já estabilizados, onde ao aplicar torque no sentido do eixo axial do item o mesmo pode ser extraído com facilidade.

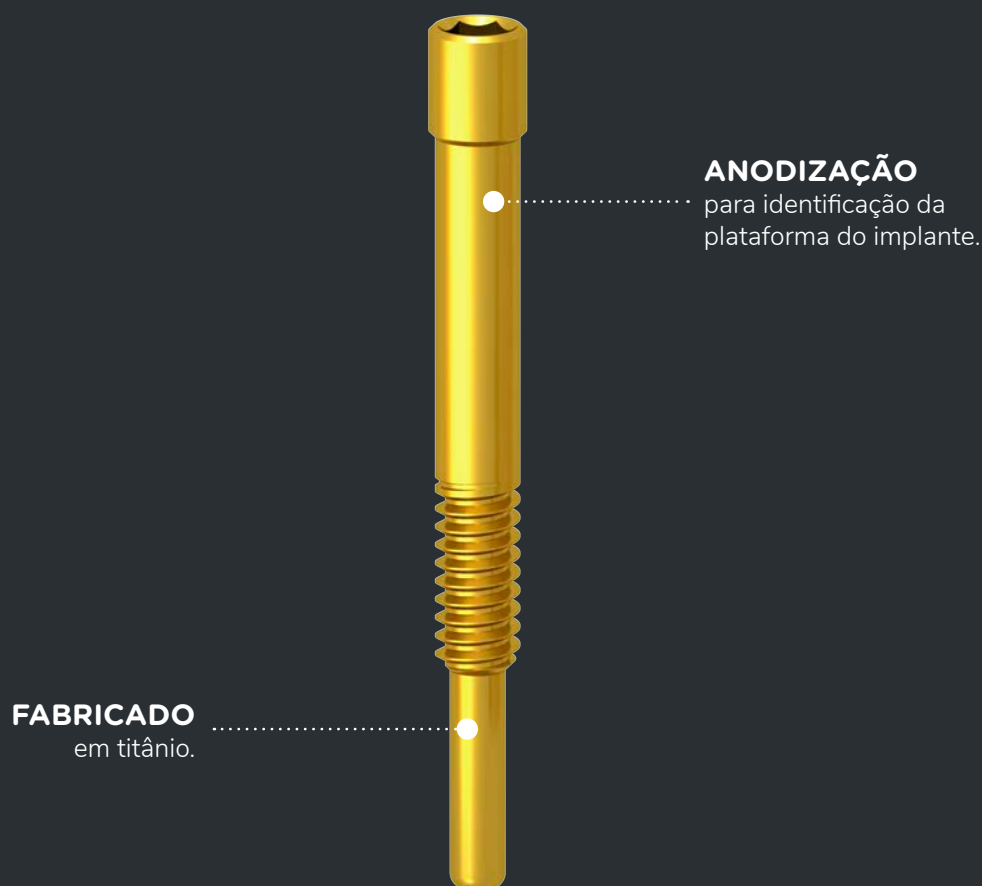

PLATAFORMAS CÓDIGOS




SL

018-15-F60-00-13



RE

018-15-F60-00-12

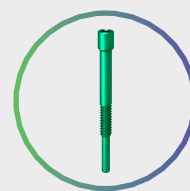


SH

018-15-F60-00-11

BANDEIRA

A Bandeira dispõe de haste de Ø1,6mm e Ø2,1mm. O design arredondado possibilita o uso em regiões com pouco espaço. Possui marcações para dimensionar o espaço entre dentes, onde a haste do acessório deve ser encaixada na perfuração realizada e as marcações de 5, 7, 9 e 11mm, indicam a distância em relação ao furo.

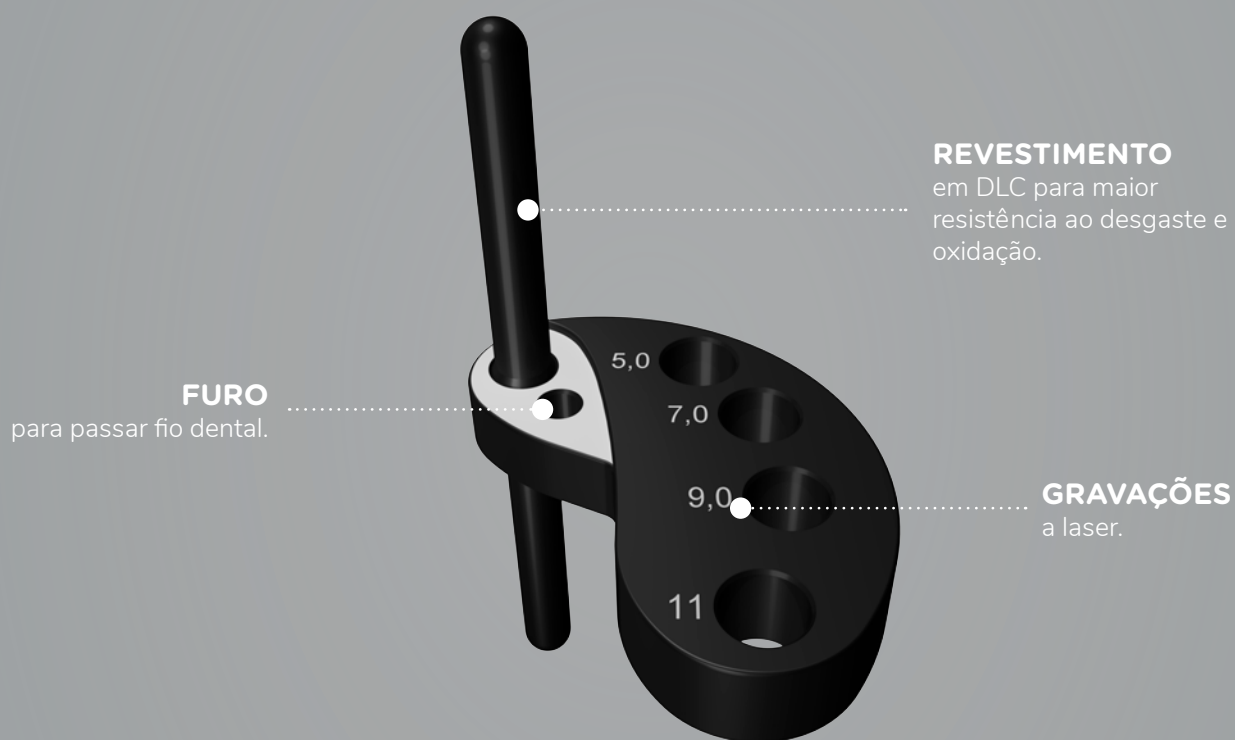


DIMENSÃO CÓDIGO

Ø1,6mm 018-15-F10-00-95

PINO DE PARALELISMO

O Pino de Paralelismo é atribuído com dois diâmetros, sendo eles de Ø1,65mm e Ø2,15mm com marcações de altura. Seu uso é indicado para auxiliar no direcionamento da perfuração.

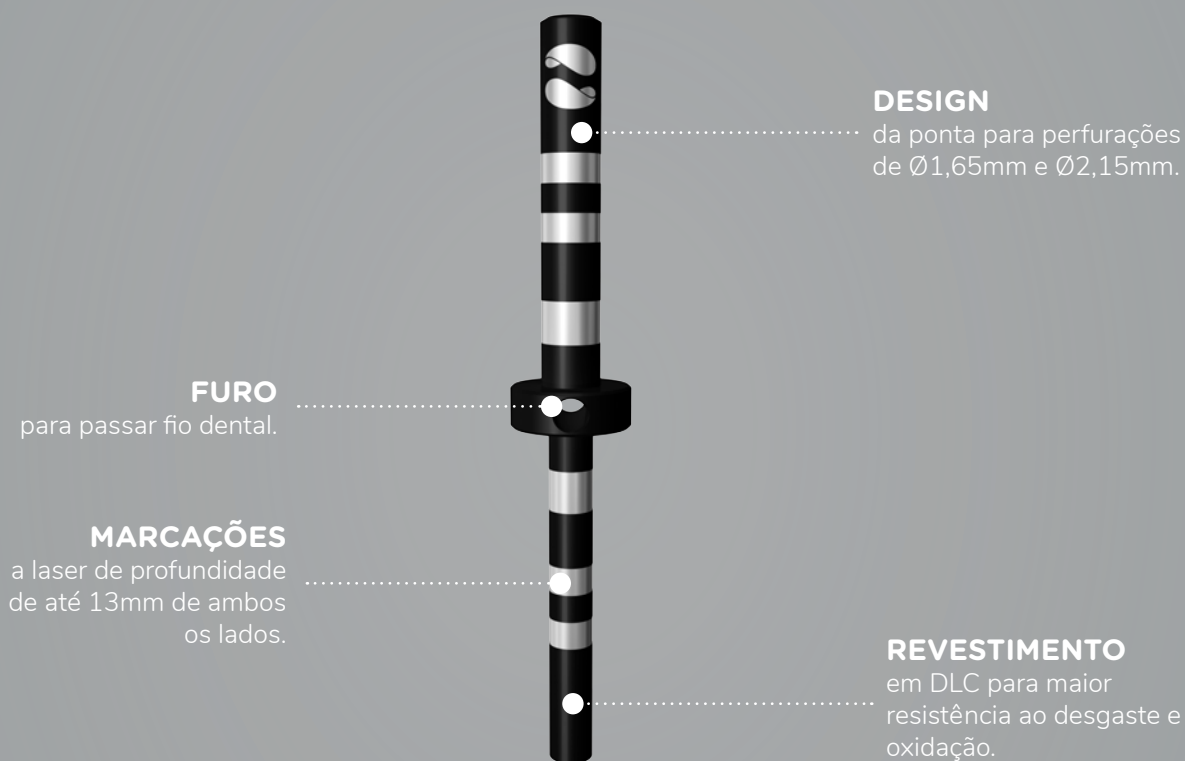

DIMENSÃO CÓDIGO

Ø1,65 x 2,15mm 018-15-F10-00-92

PINO DE PARALELISMO 25°

O Pino de Paralelismo é atribuído com a angulação de 25°. Seu uso é indicado para auxiliar no direcionamento da perfuração.




DIMENSÃO CÓDIGO

Ø1,6 x 2,15mm 018-15-F10-00-93

SONDA DE MEDIÇÃO


A Sonda tem como indicação conferir a profundidade de perfuração realizada no tecido ósseo, através de marcações em sua ponta. A haste ainda dispõe da opção de verificação do espaço existente entre dentes.

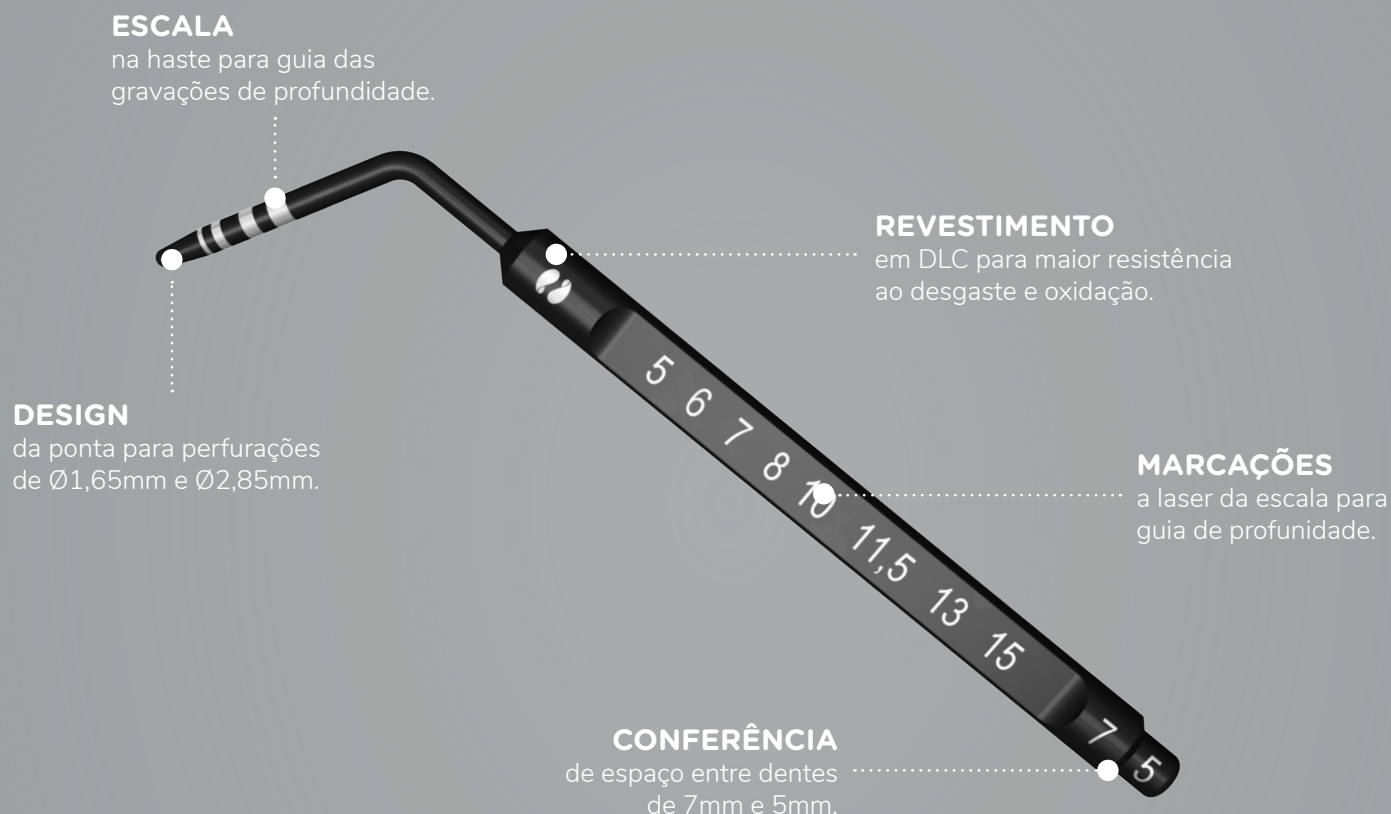

DIMENSÕES CÓDIGOS



Ø1,65mm 018-15-F10-00-91

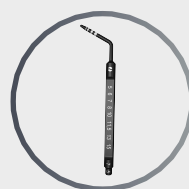

Ø2,85mm 018-15-F10-00-90

CATRACA

A Catraca apresenta design ergonômico e de fácil desmontagem que permite encaixe rápido do tambor com sistema de clique. A haste flexível garante precisão no torque.



TORQUE

no sentido horário e anti-horário.

REVESTIMENTO

em DLC para maior resistência ao desgaste e oxidação.

MATERIAL

em aço inox cirúrgico temperado.

DESIGN

único e precisão.

REFERÊNCIA

de torque de 10, 20, 30, 40, 50 e 60Ncm.

DIMENSÃO CÓDIGO

CIRÚGICA REF TORQUE 0-60

018-15-F10-01-02

CAIXA/ESTOJO PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS

CAIXA ORGANIZADORA

REGISTRO ANVISA - Não passível de regularização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F00-00-03	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA FUME
018-15-F10-00-31	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA AZUL
018-15-F10-00-04	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA BRANCA
018-15-F10-00-05	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA DOURADA
018-15-F10-00-06	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA LARANJA
018-15-F10-00-08	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA PRETA
018-15-F10-00-09	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA ROSA
018-15-F10-00-10	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA VERDE
018-15-F00-00-23	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART FUME
018-15-F00-00-29	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART AZUL
018-15-F00-00-17	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART BRANCA
018-15-F00-00-14	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART DOURADA
018-15-F10-00-06	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART LARANJA
018-15-F00-00-35	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART PRETA
018-15-F00-00-32	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART ROSA
018-15-F00-00-26	CAIXA ORGANIZADORA CIRÚRGICA SMART VERDE
018-15-F00-00-04	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA FUME
018-15-F00-00-22	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA AZUL
018-15-F00-00-28	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA BRANCA
018-15-F00-00-16	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA DOURADA
018-15-F00-00-13	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA LARANJA
018-15-F00-00-34	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA PRETA
018-15-F00-00-31	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA ROSA
018-15-F00-00-25	CAIXA ORGANIZADORA PROTÉTICA VERDE

INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO

INSTRUMENTAIS

REGISTRO ANVISA - 81684340005

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F10-00-34	INSTRUMENTAL FRESA Ø1,65 MEDIA
018-15-F10-00-31	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,15 MEDIA
018-15-F10-00-04	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,85 MEDIA
018-15-F10-00-05	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,35 MEDIA
018-15-F10-00-06	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,85 MEDIA
018-15-F10-00-07	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,35 MEDIA
018-15-F10-00-08	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,85 MEDIA
018-15-F10-00-09	INSTRUMENTAL FRESA Ø5,35 MEDIA
018-15-F10-00-10	INSTRUMENTAL FRESA Ø5,85 MEDIA
018-15-F10-00-35	INSTRUMENTAL FRESA Ø1,65 LONGA
018-15-F10-00-32	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,15 LONGA
018-15-F10-00-18	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,85 LONGA
018-15-F10-00-19	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,35 LONGA
018-15-F10-00-20	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,85 LONGA
018-15-F10-00-21	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,35 LONGA
018-15-F10-00-22	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,85 LONGA
018-15-F10-00-33	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,15 SHORT
018-15-F10-00-11	INSTRUMENTAL FRESA Ø2,85 SHORT
018-15-F10-00-12	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,35 SHORT
018-15-F10-00-13	INSTRUMENTAL FRESA Ø3,85 SHORT
018-15-F10-00-14	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,35 SHORT
018-15-F10-00-15	INSTRUMENTAL FRESA Ø4,85 SHORT
018-15-F10-00-16	INSTRUMENTAL FRESA Ø5,35 SHORT
018-15-F10-00-17	INSTRUMENTAL FRESA Ø5,85 SHORT
018-15-F10-00-25	INSTRUMENTAL FRESA LANÇA MEDIA
018-15-F10-00-74	INSTRUMENTAL EXTENSOR DE FRESA
018-15-F10-01-24	INSTRUMENTAL ADAPTADOR QUADRADO
018-15-F20-00-27	INSTRUMENTAL TAMBOR QUADRADADO CATRACA LONGO

018-15-F10-00-38	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø4,5 SHORT
018-15-F10-00-39	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø5,0 SHORT
018-15-F10-00-40	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø6,0 SHORT
018-15-F10-00-44	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø3,0 LONGO
018-15-F10-00-45	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø3,5 LONGO
018-15-F10-00-46	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø4,0 LONGO
018-15-F10-00-47	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø4,5 LONGO
018-15-F10-00-48	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø5,0 LONGO
018-15-F10-00-49	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø6,0 LONGO
018-15-F10-00-54	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø3,0 MEDIA
018-15-F10-00-55	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø3,5 MEDIA
018-15-F10-00-56	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø4,0 MEDIA
018-15-F10-00-57	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø4,5 MEDIA
018-15-F10-00-58	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø5,0 MEDIA
018-15-F10-00-59	INSTRUMENTAL MACHO DE ROSCA Ø6,0 MEDIA
018-15-F10-00-96	INSTRUMENTAL TAMBOR HEXAGONAL CATRACA CURTO
018-15-F10-00-97	INSTRUMENTAL TAMBOR HEXAGONAL CATRACA LONGO
018-15-F20-00-26	INSTRUMENTAL TAMBOR QUADRADRO CATRACA CURTO

INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO

CHAVES

REGISTRO ANVISA - 81684340002

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F20-00-09	CHAVE HEXAGONAL 1,2MM MEDIA
018-15-F20-00-10	CHAVE HEXAGONAL 1,2MM CURTA
018-15-F20-00-11	CHAVE HEXAGONAL 1,2MM LONGA
018-15-F10-00-76	CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA MEDIA
018-15-F20-00-03	CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA CURTA
018-15-F20-00-04	CHAVE HEXAGONAL 1,2 CA LONGA
018-15-F20-00-23	CHAVE HEXAGONAL 2,0MM MEDIA
018-15-F20-00-24	CHAVE HEXAGONAL 2,0MM CURTA
018-15-F10-00-77	CHAVE HEXAGONAL 2,0 CA MEDIA
018-15-F20-00-05	CHAVE HEXAGONAL 2,0 CA CURTA
018-15-F10-00-88	CHAVE DIGITAL HEX 1,2MM CURTA
018-15-F10-00-87	CHAVE DIGITAL HEX 1,2MM MEDIA
018-15-F10-00-89	CHAVE DIGITAL HEX 1,2MM LONGA
018-15-F20-00-07	CHAVE HEXAGONAL 0,9MM MEDIA
018-15-F20-00-12	CHAVE HEXALOBULAR 1,2MM MEDIA
018-15-F20-00-13	CHAVE HEXALOBULAR 1,2MM CURTA
018-15-F20-00-14	CHAVE HEXALOBULAR 1,2MM LONGA
018-15-F10-00-75	CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA MEDIA
018-15-F20-00-01	CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA CURTA
018-15-F20-00-02	CHAVE HEXALOBULAR 1,2 CA LONGA

018-15-F10-00-78	CHAVE INSERCAO SL MEDIA
018-15-F10-00-79	CHAVE INSERCAO SL LONGA
018-15-F10-00-80	CHAVE INSERCAO SL CURTA
018-15-F10-00-81	CHAVE INSERCAO RE MEDIA
018-15-F10-00-82	CHAVE INSERCAO RE LONGA
018-15-F10-00-83	CHAVE INSERCAO RE CURTA
018-15-F10-00-84	CHAVE INSERCAO SH MEDIA
018-15-F10-00-85	CHAVE INSERCAO SH LONGA
018-15-F10-00-86	CHAVE INSERCAO SH CURTA
018-15-F10-00-65	CHAVE INSERCAO SL CA MEDIA
018-15-F10-00-66	CHAVE INSERCAO SL CA LONGA
018-15-F10-00-67	CHAVE INSERCAO SL CA CURTA
018-15-F10-00-68	CHAVE INSERCAO RE CA MEDIA
018-15-F10-00-69	CHAVE INSERCAO RE CA LONGA
018-15-F10-00-70	CHAVE INSERCAO RE CA CURTA
018-15-F10-00-71	CHAVE INSERCAO SH CA MEDIA
018-15-F10-00-73	CHAVE INSERCAO SH CA CURTA
018-15-F20-00-17	CHAVE QUADRADA MEDIA
018-15-F20-00-20	CHAVE FENDA MEDIA

INSTRUMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO

ACESSÓRIO CIRÚRGICO

REGISTRO ANVISA - 81684340004

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F10-00-94	ACESSÓRIO CIRÚRGICO PROFUNDIMETRO SL
018-15-F10-00-99	ACESSÓRIO CIRÚRGICO PROFUNDIMETRO RE
018-15-F10-01-00	ACESSÓRIO CIRÚRGICO PROFUNDIMETRO SH
018-15-F60-00-11	ACESSÓRIO CIRÚRGICO EXTRATOR DE COMPONENTES SH
018-15-F60-00-12	ACESSÓRIO CIRÚRGICO EXTRATOR DE COMPONENTES RE
018-15-F60-00-13	ACESSÓRIO CIRÚRGICO EXTRATOR DE COMPONENTES SL
018-15-F10-00-95	ACESSÓRIO CIRÚRGICO BANDEIRA
018-15-F10-00-92	ACESSÓRIO CIRÚRGICO PINO DE PARALELISMO
018-15-F10-00-93	ACESSÓRIO CIRÚRGICO PINO DE PARALELISMO 25°
018-15-F10-00-90	ACESSÓRIO CIRÚRGICO SONDA DE MEDIÇÃO Ø2,85
018-15-F10-00-91	ACESSÓRIO CIRÚRGICO SONDA DE MEDIÇÃO Ø1,65

CATRACA

REGISTRO ANVISA - 81684340003

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F10-01-02	CIRURGICA REF TORQUE 0-60

Suporte Plenum[®]

Oferecemos suporte técnico
especializado
em todo o território nacional,
por meio de uma equipe
profissional qualificada e apta
para esclarecer todas as suas
possíveis dúvidas.

ENTRE EM CONTATO





INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA

AV. AIN ATA, 640 – JUNDIAÍ – SP – CEP – 13212-213

 +55 11 3109 9000

 +55 11 9 7690 7365

 relacionamento@plenum.bio

www.plenum.bio

Catálogo Digital Caixas Organizadoras &
Instrumentos de Uso Odontológico – Rev. 03